

PROPHYBRUSH - Sortiment – Nylon-Prophylaxe-Bürsten in 3 Härten
zur gezielten Entfernung von Belägen und leichtem Zahnstein / zur Einmalanwendung

PM 1473 PM 1475 PM 1476 PM 1477 PM 1425

opt. 2.000 min⁻¹

Anzahl Vpk zu 100 Stück

blau = hart - bei besonders hartnäckigen Belägen, reduziert den Zeitaufwand bei der Politur

PM 1573 PM 1575 PM 1576 PM 1577 PM 1525

opt. 2.000 min⁻¹

Anzahl Vpk zu 100 Stück

violett = mittel - äquivalent zu den Standard-Prophylaxe-Bürsten in weiß

PM 1673 PM 1675 PM 1676 PM 1677 PM 1625

opt. 2.000 min⁻¹

Anzahl Vpk zu 100 Stück

rosa = weich - bei besonders empfindlichen Patienten nutzen

PROPHYBRUSH - Standard-Sortiment – Nylon-Prophylaxe-Bürsten
zur universellen Nutzung in mittlerer Härte / zur Einmalanwendung


PM 1273 PM 1275 PM 1276 PM 1277 PM 1225

opt. 2.000 min⁻¹

Anzahl Vpk zu 100 Stück

weiß = mittel - mittlere Härte

ökoDENT PROPHYBRUSH - TestSET
zur Auswahl Ihrer persönlichen Instrumente

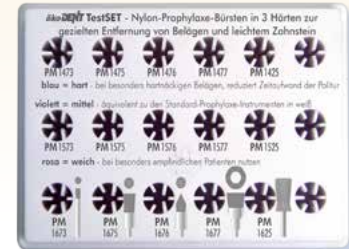

SET-Preis € 17,20 zzgl. MwSt.

Fragen Sie bitte Ihren/Ihre ökoDENT-Fachberater(in) nach Ihrem ökoDENT PROPHYBRUSH-TestSET!

PROPHY CARE™ - latexfrei


Der exklusive, weiche ProphyCare™ schmiegt sich den Zahnkonturen an, um das selektive Entfernen von Verfärbungen, die interproximale Reinigung sowie die Spritzkontrolle mit weniger Druck und geringerer Ermüdung zu unterstützen.

Die optimierte Größe erleichtert den einfachen Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen, ohne die Aufnahmekapazität der Paste zu beeinträchtigen.

Das einzigartige Design eignet sich für die Behandlung bei Erwachsenen und Kindern sowie als Ersatz für spitze Polierer.

Das weiche Material sorgt für eine sanfte Massage der Gingiva, verbessert den subgingivalen Zugang und erreicht die Taschen, um den

PM 1228

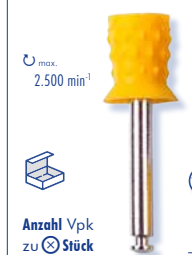

Plaque-Biofilm effektiv zu entfernen.

Innenliegende Lamellen minimieren das Spritzen und erhöhen die Reibung zur effizienten Entfernung von Plaque.

Aussennoppen optimieren die interproximale Reinigung.

max. 2.500 min⁻¹



Anzahl Vpk zu 100 Stück

Fragen zum Produkt? Ihr/Ihre ökoDENT-Fachberater(in) berät Sie gern zu unseren Produkten, den Liefermengen, Preisen und Ihren Konditionen.

Datum

Vor- & Nachname (bitte in Blockschrift)

Praxisstempel / Kontaktadresse

ökoDENT-Kundennr.
(falls verfügbar)

Unterschrift des Auftraggebers

ökoDENT Interdental-Bürste, latexfreier & abrasive Polierer + ökoCleaner

A2.42 | Rev. 01/2021 | D

INTERDENTAL - BÜRSTE
Reinigung der Approximal-räume bei der Prophylaxe

PMI 1200

U_{max.} 400 min⁻¹

Anzahl Vpk zu Stück 10

... ebenso bei der Reinigung von Implantaten, von Buckets (KFO), von Wurzelkanälen, unter Brücken u.s.w.

PROPHY TWIST
entfernt Verfärbungen aller Art

PM 1229

U_{opt.} 10.000 bis 15.000 min⁻¹

Anzahl Vpk zu Stück 10

latexfreier Prophylaxepolierer
Einwegprodukt
mit & ohne Polierpaste verwenden

PROPHY - WHITE & - BLUE
Prophylaxepolierer mit eingearbeiteten Abrasivstoffen

PM 1222 **PM 1232** **PM 1233** **PM 1235**

U_{opt.} 2.000 min⁻¹

Anzahl Vpk zu Stück 50 10 50 10 50 10

PROPHY - WHITE und **- BLUE** sind besonders effizient, da die Polierpaste bereits in das Material eingearbeitet ist. Sie eignen sich gut zum Recall nach kieferorthopädischen und Ultraschall-Behandlungen.

ökoCleaner glasfaserverstärkte Komposit-Polierer zur Entfernung von Belägen und Verfärbungen
Professionelles Finishing ohne das Risiko von Zahnschmelzdefekten

Hervorragend geeignet zur **Reinigung von Titanimplantaten**, zum Finishing nach dem Scaling und Ultraschallscaling, zur Entfernung von Zahnbelägen - besonders schonend am Zahnhals, subgingivale Wurzelglättung ohne Irritation des Weichgewebes

Einzel-Artikel	OEC 2501	OEC 2502	OEC 2504	OEC 2505	OEC 2506
U _{opt.} 10.000 bis 15.000 min ⁻¹					
Anzahl Vpk zu Stück	10	10	10	10	10
Sortiment (je 1 Stk.)					
OEC 2500	X 1	X 1	X 1	X 1	X 1

zur Verwendung im blauen oder grünen Winkelstück mit reduzierter Drehzahl – unter leichtem Druck und mit Wasserspray arbeiten – Reinigung in med. Alkohol – im Autoklaven bis 135° sterilisieren

Instrumente durch kontinuierliche Abrasion selbstschärfend – keine Abrasion von Schmelz und Keramik – schonend zu Dentin, Wurzelzement und Komposit – gleitet über Weichgewebe

Paroformen = Spezialformen
OEC 2505 & OEC 2506

Für empfindliche Patienten schonende Alternative zum Airbrush, besonders im Zahnhalsbereich

Perfekte Prophylaxe von KFO-Patienten - Reinigung um die Brackets

Finishing bei der Klebereste-Entfernung nach der der Entfernung von Brackets und Retainern

Entfernung von Zementüberschüssen beim Einsetzen von Inlays



Fragen zum Produkt? Ihr/Ihre ökoDENT-Fachberater(in) berät Sie gern zu unseren Produkten, den Liefermengen, Preisen und Ihren Konditionen.

_____ Datum _____ Vor- & Nachname (bitte in Blockschrift)

_____ Praxisstempel / Kontaktadresse _____ ökoDENT-Kundennr. (falls verfügbar) _____ Unterschrift des Auftraggebers