



COMPO-TOP – hochwertiges, diamantiertes Zweistufen-Poliersystem – für perfekt glänzende Oberflächen bei Kompositen mit Vor- und Hochglanzpolitur

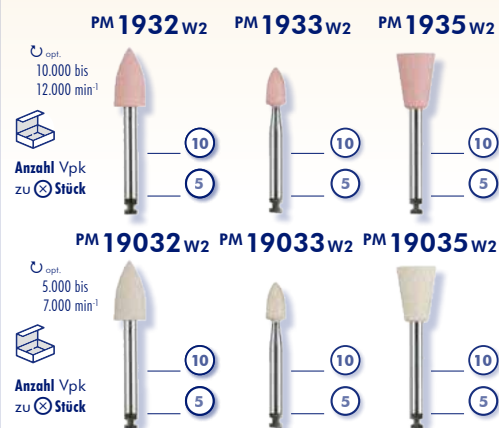

Die Kautschukbindung nimmt während der Politur die Wärme auf. Das verhindert Beschädigungen an den Übergängen zw. Zahn und Komposit. Die Diamantkörnung eignet sich ebenso zur Entfernung feiner Klebstoffreste.

DIA-COMP PLUS – Zweistufiges Diamantpoliersystem zum Formen, Glätten und Hochglanzpolieren aller Komposite, Kompomere, Ionomere und der neuesten Generation hochgefüllter Hybridkomposite.

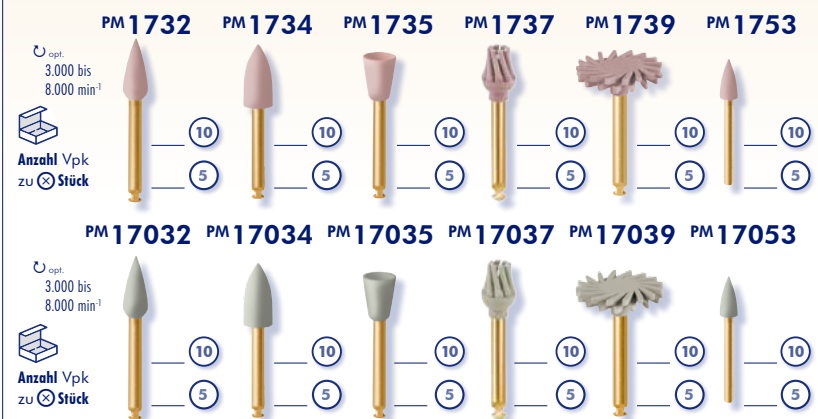


DIA-COMP PLUS Das Poliersystem für herausragende Polierergebnisse bei sehr langer Lebensdauer.

COMPO-MEDIUM + FINE zweistufiges, ökonomisches Poliersystem zum Formen, Glätten und Polieren von Kompositen



Der Compo-Polierer enthält Siliziumkarbid als Schleifkorn, eingebettet in eine hart-flexible Kautschukmatrix. Als ökonomische Alternative zur Kompositopolitur hervorragend geeignet.

COMPO-UNI – Silikonpolierer mit universellen Eigenschaften zum Formen und Glätten von Keramik, Edelmetall, Kunststoff und Zahnschmelz

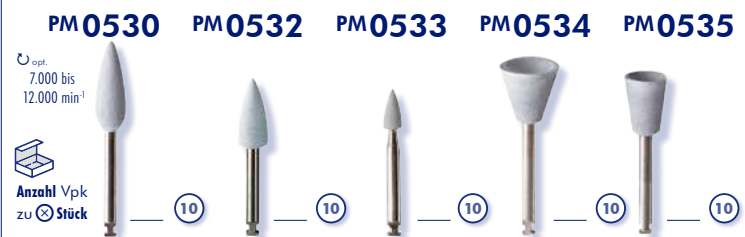

• zur Vorpolitur, mit mittlerer Körnung • abtragend und glättend auf Kompositen

ÖKOPOL – Spezialpolierer für Hybrid-Komposite Zweistufen-Poliersystem – optimiert auch für Ceromer



• Nicht-Diamant-Vorpolierer und Diamant-Hochglanzpolierer als wirtschaftliche Kombination, um sehr ästhetische Ergebnisse zu erreichen.
• Ergibt ultraglatte Oberflächen mit Hochglanz.

Fragen zum Produkt? Ihr/Ihre ökoDENT-Fachberater(in) berät Sie gern zu unseren Produkten, den Liefermengen, Preisen und Ihren Konditionen.

Datum

Vor- & Nachname (bitte in Blockschrift)

Praxisstempel / Kontaktadresse

ökoDENT-Kundennr.
(falls verfügbar)

Unterschrift des Auftraggebers

ZIRKO-SHINE – Diamantpoliersystem für Zirkonoxid mit erhöhter Standzeit, dreistufig

	PM 2532	PM 2535	PM 2553
U _{opt.} 5.000 bis 10.000 min ⁻¹			
Anzahl Vpk zu Stück	10 5	10 5	10 5
	PM 2632	PM 2635	PM 2653
U _{opt.} 5.000 bis 10.000 min ⁻¹			
Anzahl Vpk zu Stück	10 5	10 5	10 5
	PM 2732	PM 2735	PM 2753
U _{opt.} 10.000 bis 20.000 min ⁻¹			
Anzahl Vpk zu Stück	10 5	10 5	10 5

- für nachträgliche Formkorrekturen
- anschließende Hochglanzpolitur

CERA-SHINE – Dreistufiges Diamantpoliersystem zum Abtragen, Glätten und Hochglanzpolieren von Keramik

	PM 2032	PM 2035	PM 2039	PM 2053	PM 2010	PM 2020
U _{opt.} 5.000 bis 10.000 min ⁻¹						
Anzahl Vpk zu Stück	10 5	10 5	10 5	10 5	5 1	5 1
	PM 2132	PM 2135	PM 2139	PM 2153	PM 2110	PM 2120
U _{opt.} 5.000 bis 10.000 min ⁻¹						
Anzahl Vpk zu Stück	10 5	10 5	10 5	10 5	5 1	5 1
	PM 2232	PM 2235	PM 2239	PM 2253	PM 2210	PM 2220
U _{opt.} 10.000 bis 20.000 min ⁻¹						
Anzahl Vpk zu Stück	10 5	10 5	10 5	10 5	5 1	5 1

- sehr kurze Bearbeitungszeiten
- Korrekturwerkzeug von Glanzbrandfehlern
- herausragende Qualität der Politur ohne Paste
- zur nachträglichen Anpassung geschätzt und ökonomisch

SIC-BRUSH – Polieren ohne Polierpaste

Das ultimative Finishingwerkzeug für die Erhaltung aufwendig modellierter Keramik- und Kunststoffflächen während der Glanzpolitur, bei optimaler Minimierung der Rautiefe.

	PM 1245	PM 1246	PM 1247
U _{opt.} 3.000 bis 6.000 min ⁻¹			
Anzahl Vpk zu Stück	10	10	10

- Polierbürstchen, in denen Siliziumkarbid-Polierkörper direkt eingearbeitet sind; extrem formstabile Ausführung
- anwendbar auf Keramik und mikrogefüllten Kompositen
- in der Anwendung: tupfende und kreisende Arbeitsweise
- immer mit CERA-SHINE bzw. COMPO-TOP vorarbeiten

ÖKO-FLEXI-S – Flexible Polierscheiben (Einmalprodukt)

hochflexible, aluminiumoxid-beschichtete Polierscheiben für natürlichen Glanz auf allen Nano-, Hybrid- und herkömmlichen Kompositen

Einzel-Artikel	P 5001	P 5002	P 5003	P 5004	PA 4002
Anzahl Vpk zu Stück	100	100	100	100	10
Starter-Kit P 5000 (je 25 Stk. + 1 Mandrell)					
Kit(s)	X 25	X 25	X 25	X 25	X 1

- Blau** = 1. Stufe: Abtragen/Konturieren **Rot** = 2. Stufe: Glätten/Vorpolieren U_{opt.} 3.000 - 6.000 min⁻¹
Gelb = 3. Stufe: Politur **Weiß** = 4. Stufe: Hochglanzpolitur

Fragen zum Produkt? Ihr/Ihre ökoDENT-Fachberater(in) berät Sie gern zu unseren Produkten, den Liefermengen, Preisen und Ihren Konditionen.

Datum

Vor- & Nachname (bitte in Blockschrift)

Praxisstempel / Kontaktadresse

ökoDENT-Kundennr.
(falls verfügbar)

Unterschrift des Auftraggebers